

CGM-huisarts

Het opnemen van zelfmetingen van en door patiënten


De tijd van het aanleveren van op een blaadje geschreven metingen of een ingevulde Excel-print is voorbij. Het inleveren en verwerken kan nu ook digitaal via een portaal of een PGO. Het is wel belangrijk om hier met de patiënt goede afspraken over te maken. Ook dient er in het HIS ingesteld te worden dat de metingen van de patiënt via een PGO mogen worden uitgevoerd.

Deze instelling is te registreren binnen het scherm **Toestemming patiënt**. Via **Patiënten** -> **Patiëntbeheer** selecteer je de patiënt, waar-

na je in het linkermenu op de link voor de pagina klikt. Je kunt dan opt-in geven voor 'Sturen zelfmetingen van vitale functie door patiënt'. Dit kan het beste gebeuren als de afspraak over het werkplan met de patiënt wordt opgesteld.

Bij het uitvoeren van dat werkplan kan de patiënt dan alle gedane metingen, in één keer of per meting, invoeren in een portaal of PGO en insturen naar het praktijksysteem. De opgemaakte berichten over de zelfmetingen worden dan gepresenteerd in het overzichtsscherm **Postvak**.

Voor het makkelijk verwerken van het zelfmetingsbericht in het postvak is er een aantal voorzieningen getroffen. Ieder zelfmetingsbericht heeft als kenmerk in de kolom 'Soort' een 'T' staan. Met een vinkje bij de rubriek **Thuismetingen** kan worden gefilterd op de betreffende berichten in het scherm van het postvak (zie figuur 1). Er kan daarbij per gebruiker worden ingesteld of de berichten bij het openen van het postvak direct in het postvak-scherm gepresenteerd worden, of pas na aanvinken. Je kunt er dus voor kiezen om ze altijd direct te

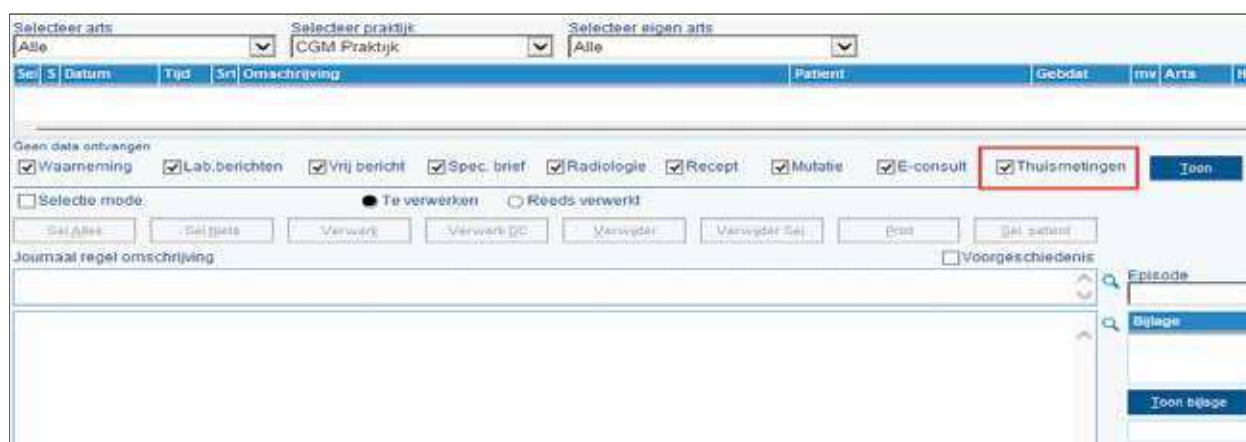

Figuur 1. Er kan worden gefilterd op de betreffend berichten in het scherm van het postvak

zien en te verwerken of pas na de filtering op de berichten. De instelling is vast te leggen in **Stamgegevens -> Zorgverleners -> selecteren zorgverlener** en het linker menu **Instellingen**.

Voor de postvakaccordeerfunctie is er bovendien in voorzien om dat voor de zelfmetingsberichten ook te laten gelden. Het accorderen van postvakberichten houdt in dat een postvakbericht pas uit het overzicht verdwijnt als iedereen het betreffende bericht heeft gezien. Als hiervoor interesse bestaat is het goed om voor het accorderen van berichten de handleiding te raadplegen.

Als het zelfmetingsbericht is verwerkt, verschijnt deze in het dossier en natuurlijk in het scherm **Uitslagen metingen bekijken**. Voor het filteren in dit laatstgenoemde scherm is ook een vinkrubriek opgenomen voor de thuismetingen. Vooralsnog wordt iedere meting in de recente releases opgenomen in de meetwaarden met de datum van verrichting. Hiermee kunnen verschillende metingen op verschillende data worden aangeleverd, zonder dat de metingen op de datum van indienen werden geregistreerd.

In het HIS-Referentiemodel wordt er over zelfmetingen aangegeven dat dit niet zomaar en al te uitgebreid met iedere patiënt dient te gebeuren. Met de opt-infunctie in CGM-HUISARTS is hier duidelijk rekening mee gehouden. Ervaring leert wel dat het belangrijk is om met een digitaal vaardige patiënt goede afspraken te maken om betrouwbaar materiaal van die patiënt te verkrijgen.

RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL